DELPHION

No active tra







RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

Search: Quick/Number Boolean Advanced Der

The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | File History | Other choices

Tools: Add to Work File: Create new Work

View: Expand Details | INPADOC | Jump to: Top

Go to: Derwent

ଟ Title:

WO9915621A1: LYSIS METHOD FOR MICRO-ORGANISMS[French]

P Derwent Title:

Mechanical lysis of microbial cells - by vortexing with small hard balls

[Derwent Record]

ਊ Country:

WO World Intellectual Property Organization (WIPO)

ទ Kind:

A1 Publ.of the Int.Appl. with Int.search report i

위Inventor:

CLEUZIAT, Philippe; 16, rue de l'Espérance, F-69003 Lyon, France

SANTORO, Lyse; 47, avenue Bergeron, F-69269 Charbonnières les

Bains, France

BIO MERIEUX, Chemin de l'Orme, F-69280 Marcy l'Etoile, France

Corporate Tree data: Biomerieux SA (BIOMERIEUX); News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed:

1999-04-01 / 1998-09-23

§ Application

WO1998IB0001475

Number: PIPC Code:

Advanced: C12M 1/33; C12M 3/08; C12N 1/06;

Core: more...

IPC-7: C12M 1/33; C12M 3/08; C12N 1/06;

& Priority Number:

1997-09-23 FR1997000012164

C12M1/33; C12M3/08; C12N1/06C;

FECLA Code:

The invention concerns a lysis method for a biological sample comprising at least one micro-organism of the bacteria type, for releasing a nucleic material of interest belonging to said microorganism, which consists in: providing in a container a biological sample in liquid medium; providing in said container at least one particulate material, relatively hard, and substantially inert with respect to the nucleic material; submitting the biological sample and particulate material mixture to a movement. The invention is characterised in that in combination, the selected movement is of the vortex type, and satisfies the following conditions: the particulatematerial consists of beads with diameter between 90 and 150 .mgr.m; and the apparent volume of the beads (Vb) and the volume of the liquid sample (Ve) are linked by the relationship Ve = .agr..Vb, with .agr. ranging between 1.4 and 10 when the container is tubular in shape, and .agr. is not more than 2.1 when

the container is in the shape of a disk; under such conditions, without any addition of reagent and/or additional process, the method consists in releasing directly into the liquid medium the

nucleic material in native state and accessible to any reagent in a subsequent process. [French]

PAttorney, Agent or Firm: **CABINET GERMAIN & MAUREAU;**

& INPADOC Legal Status:

Show legal status actions

Get Now: Family Legal Status Report

₽ Designated Country:

AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY CA CH CN CU CZ DE DK EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MD MG MK MN MW MX NO NZ PL PT RO RU SD SE

SG SI SK SL TJ TM TR TT UA UG US UZ VN YU ZW, European patent: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE, OAPI patent: BF BJ CF CG CI CM GA GN GW ML MR NE SN TD TG, ARIPO patent: GH GM KE LS MW SD SZ UG ZW, Eurasian patent: AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM

영Family:

Show 14 known family members

First Claim: Show all claims REVENDICATIONS 1. Procédé de lyse d'un échantillon biologique comprenant au moins un micro-organisme de type bactérie, pour libérer au moins un matériel nucléique d'intérêt appartenant audit micro-organisme, selon lequel:

Variable Variable Variable

<u>+</u> PROCEDE DE LYSE DE MICRO-ORGANISME La présente invention concerne un procédé de lyse de micro-organisme, permettant de manière générale de rompre ce dernier, notamment la membrane d'une ou plusieurs cellules, pour libérer au moins un matériel nucléique d'intérêt, par exemple acide désoxyribonucléique (ADN) et acide ribonucléique (ARN) à traiter postérieurement, notamment analyser.

Le document US-C-5,643,767 divulgue un procédé de lyse pour séparer les ADN ou ARN de cellules dans une solution liquide. On utilise à cette fin un contenant qui contient un solvant pour extraire l'ARN ou l'ADN, une pluralité de particules ayant 0,1 à 1 mm de diamètre, et au moins une particule plus grande ayant de 3 à 5 mm de diamètre. Un mouvement est appliqué au contenant ainsi rempli, à savoir un mouvement de secousse. Il est expressément indiqué dans ce document que ce mouvement est préféré à un mouvement de rotation, tel que généré avec un mélangeur ou autre homogénéiseur, parce que avec un mouvement de rotation les cellules ne font simplement que tourner dans le même sens, et n'ont pas de collision efficace entre elles et avec les billes, pour être écrasées entre les billes.

POther Abstract Info: None







Nominate this for the Gallery...



Powered by

Copyright © 1997-2006 The Thor

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact U

PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 6: C12M 1/33, C12N 1/06, C12M 3/08

(11) Numéro de publication internationale:

WO 99/15621

A1 (43) Date de publication internationale:

ler avril 1999 (01.04.99)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/IB98/01475

(22) Date de dépôt international: 23 septembre 1998 (23.09.98)

(30) Données relatives à la priorité:

97/12164

23 septembre 1997 (23.09.97) FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): BIO MERIEUX [FR/FR]; Chemin de l'Orme, F-69280 Marcy l'Etoile (FR).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): CLEUZIAT, Philippe [FR/FR]; 16, rue de l'Espérance, F-69003 Lyon (FR). SANTORO, Lyse [FR/FR]; 47, avenue Bergeron, F-69269 Charbonnières les Bains (FR).
- (74) Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU; Boîte postale 6153, F-69466 Lyon Cedex 06 (FR).

(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues.

- (54) Title: LYSIS METHOD FOR MICRO-ORGANISMS
- (54) Titre: PROCEDE DE LYSE DE MICRO-ORGANISME

(57) Abstract

The invention concerns a lysis method for a biological sample comprising at least one micro-organism of the bacteria type, for releasing a nucleic material of interest belonging to said micro-organism, which consists in: providing in a container a biological sample in liquid medium; providing in said container at least one particulate material, relatively hard, and substantially inert with respect to the nucleic material; submitting the biological sample and particulate material mixture to a movement. The invention is characterised in that in combination, the selected movement is of the vortex type, and satisfies the following conditions: the particulate material consists of beads with diameter between 90 and 150 μ m; and the apparent volume of the beads (Vb) and the volume of the liquid sample (Ve) are linked by the relationship $Ve = \alpha.Vb$, with α ranging between 1.4 and 10 when the container is tubular in shape, and α is not more than 2.1 when the container is in the shape of a disk; under such conditions, without any addition of reagent and/or additional process, the method consists in releasing directly into the liquid medium the nucleic material in native state and accessible to any reagent in a subsequent process.

(57) Abrégé

Procédé de lyse d'un échantillon biologique comprenant au moins un micro-organisme de type bactérie, pour libérer un matériel nucléique d'intérêt appartenant audit micro-organisme, selon lequel: on dispose dans un contenant un échantillon biologique en milieu liquide, on dispose dans ledit contenant au moins un matériau particulaire, relativement dur, et substantiellement inerte par rapport au matériel nucléique, on soumet le mélange de l'échantillon biologique et du matériau particulaire à un mouvement, caractérisé en ce que, en combinaison: le mouvement choisi est de type vortex, et répond aux conditions suivantes: le matériau particulaire est constitué de billes de diamètre compris entre 90 et 150 μm, et le volume apparent des billes, Vb, et le volume de l'échantillon liquide, Ve, sont liés par la relation Ve = α . Vb, avec α compris entre 1,4 et 10 lorsque le contenant est de forme tubulaire, et α est inférieur ou égal à 2,1 lorsque le contenant est de forme disque, moyennant quoi, sans ajout de réactif et/ou étape opératoire supplémentaire, on libère directement dans le milieu liquide le matériel nucléique à l'état natif et accessible à tout réactif de traitement postérieur.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanic	50					
		ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	Fi	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
ΑU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaîdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	1E	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanic	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italic	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JР	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Кепуа	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande	٠,,	2111040440
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		
				50	omgapour		

PROCEDE DE LYSE DE MICRO-ORGANISME

La présente invention concerne un procédé de lyse de micro-organisme, permettant de manière générale dernier, notamment la membrane d'une rompre ce plusieurs cellules, pour libérer au moins un matériel 5 nucléique d'intérêt, par exemple acide désoxyribonucléique et acide ribonucléique (ARN) à traiter (ADN) postérieurement, notamment analyser.

Le document US-C-5,643,767 divulgue un procédé de lyse pour séparer les ADN ou ARN de cellules dans une 10 solution liquide. On utilise à cette fin un contenant qui contient un solvant pour extraire l'ARN ou l'ADN, une pluralité de particules ayant 0,1 à 1 mm de diamètre, et au moins une particule plus grande ayant de 3 à 5 mm de diamètre. Un mouvement est appliqué au contenant ainsi 15 à savoir un mouvement de secousse. expressément indiqué dans ce document que ce mouvement est préféré à un mouvement de rotation, tel que généré avec un mélangeur ou autre homogénéiseur, parce que avec un mouvement de rotation les cellules ne font simplement que 20 tourner dans le même sens, et n'ont pas de collision efficace entre elles et avec les billes, pour écrasées entre les billes.

Le document US-C-4,295,613 divulgue un appareil pour rompre des bactéries, selon lequel l'échantillon contenant les cellules est disposé dans un tube en contact avec de fines billes. Les billes, d'un diamètre de l'ordre de 70 à 110 μ m, sont introduites dans le tube, l'échantillon à traiter et toute solution tampon nécessaire, puis on applique au contenant ou tube un mouvement d'oscillation selon un axe horizontal, d'obtenir les constituants sub-cellulaires en solution tels que enzymes, protéines, carbohydrates,...

25

30

Le document FR-A-1576299 divulgue un procédé pour rompre des cellules végétales et animales, selon lequel on utilise un matériau particulaire, dont la dimension des particules est de 0,05 à 1 mm de diamètre, les particules

2

pouvant être en acier ou autre matériau analogue. Un mouvement est appliqué au mélange de l'échantillon biologique et des particules, selon un écoulement laminaire.

Le document EP-A-0317 803 divulgue un procédé pour générer des liposomes multilamellaires encapsulant un milieu aqueux. Le procédé consiste à mélanger des lipides et le milieu aqueux à encapsuler, à agiter le mélange dans un contenant en présence de particules ayant un diamètre inférieur à 3 mm, la taille préférée étant 50 à 100 μ m, pour obtenir des liposomes ayant un diamètre d'environ 150 à 3000 nanomètres.

Le document EP-A-0796 917 divulque un dispositif qui libère des particules dans un échantillon biologique contenant des cellules. Lorsque l'échantillon est agité ou 15 soniqué, ce dispositif comprend une cloison qui retient les particules durant une durée suffisante, et ensuite les libérer et rompre les cellules, ce qui permet ainsi de rendre accessibles les acides nucléiques. Les particules retenues par la cloison, qui sont en verre, en plastique, 20 ou en métal tel que le zirconium, peuvent avoir des formes différentes, et ont un diamètre d'environ 0,1 à 0,15 mm. Une particule est affectée à casser la cloison, et a un diamètre d'environ 1 à 4 mm, de préférence 25 L'appareil de mise en mouvement alternatif un agitateur de marque BioSpec®.

Le document EP-A-0288618 divulgue un procédé de lyse cellulaire, dont des micro-organismes, pour libérer des constituants sub-cellulaires incluant ADN et ARN solution. L'échantillon biologique est placé dans contenant avec des particules de tailles différentes. Le contenant est alors soumis à sonication jusqu'à ce que les cellules libèrent leurs constituants. Les ultra-sons vibration mettent particules en à travers les l'échantillon, ce qui provoque la rupture des cellules par cisaillement. Les particules sont des billes de verre de

30

35

PCT/IB98/01475 WO 99/15621

3

diamètre compris entre 0,05 et 1 mm. Le temps sonication est de 10 minutes à température ambiante. L'ARN et l'ADN sont libérés de manière accessible à des sondes génétiques nucléiques d'hybridation.

5

30

Le document US-C-5,464,773 divulgue un appareil pour lyser des cellules, sans détruire les constituants sub-cellulaires, pour notamment libérer l'ARN et l'ADN d'effectuer postérieurement une hybridation. contenant utilisé contient deux tailles de billes 10 zirconium, verre, ou matière plastique ou autre. Dans un mode préféré, le contenant contient 400 μ l de particules de zirconium de deux tailles et poids différents, exemple 0,7 g et 0,1 mm de diamètre et 0,65 g et 0,5 mm de diamètre. Le mouvement appliqué au contenant est 15 mouvement de type vibratoire, en particulier oscillatoire.

Le document US-C-4,666,850 divulgue un appareil et un procédé pour lyser un échantillon sanguin lors de sa centrifugation. Le contenant reçevant l'échantillon sanguin contient des particules ou billes, en matière plastique ou en verre, qui doivent avoir une taille qui n'empêche pas la sédimentation des bactéries au fond du tube lors de la centrifugation.

Le document EP-A-0341215 divulque un procédé pour produire des protéines hétérologues à partir de levures transformées génétiquement. Afin d'évaluer la quantité de protéines, il est précisé simplement que pour lyser les cellules, on applique des forces mécaniques cisaillement en secouant l'échantillon biologique contenant les levures avec des billes de verre.

Le document EP-A-0284044 divulque un procédé pour augmenter la production de protéines dans les levures. Il est indiqué que les cellules (levures), pour l'analyse de la quantité de protéines, sont lysées de préférence en appliquant un mouvement de type vortex à l'échantillon 35 biologique, avec des billes de verre de diamètre 450-500

4

 μm à vitesse maximale pendant une minute, trois fois de suite.

Le document US-C-4,775,622 divulgue un procédé pour exprimer et récupérer des protéines à partir d'une 5 culture de levures.

Les procédés généralement utilisés pour lyser un échantillon biologique comprenant au moins un microorganisme, spécifiquement pour libérer au moins un matériel nucléique d'intérêt, consistent essentiellement selon l'art antérieur en ce que:

- on dispose dans un contenant un échantillon biologique en milieu liquide, comprenant le microorganisme à lyser,
- on dispose dans ledit contenant au moins un 15 matériau particulaire, relativement dur, et substantiellement inerte par rapport au matériau nucléique,
- et on soumet le mélange de l'échantillon biologique et du matériau particulaire essentiellement à 20 mouvement alternatif, d'amplitude et/ou fréquence variable s'il s'agit d'un mouvement régulier, selon la mise technique ou l'équipement retenu pour la en mouvement.

Ces procédés utilisés présentent certains 25 inconvénients. Ils ne sont pas suffisamment efficaces, notamment la lyse cellulaire s'avère insuffisante pour libérer le matériel nucléique en quantité et qualité.

De plus, ils ne permettent pas toujours de lyser des cellules réputées résistantes à la lyse, notamment les 30 cellules des bactéries à Gram+, par exemple celles de Mycobactéries.

De même, la mise en oeuvre de ces procédés nécessite souvent l'ajout de réactifs supplémentaires tels que par exemple des enzymes et/ou des détergents.

Selon la présente invention, on a trouvé que, contrairement à l'enseignement divulgué dans le brevet US

5

5,643,767, un mouvement rotatoire de type Vortex était particulièrement adapté, pour lyser des micro-organismes et libérer directement le matériau nucléique d'intérêt, à la condition de choisir certains paramètres pour ce mouvement, en relation notamment avec le contenant.

L'invention a donc pour objet un procédé de lyse complète, efficace et simple d'un échantillon biologique comprenant au moins un micro-organisme, sans réactif et/ou étape opératoire supplémentaire au cours de la mise en oeuvre du procédé.

La premier objet de la présente invention est donc un procédé de lyse d'un échantillon biologique comprenant au moins un micro-organisme de type bactérie, pour libérer au moins un matériel nucléique d'intérêt appartenant audit micro-organisme, selon lequel:

- on dispose dans un contenant ledit échantillon biologique en milieu liquide,

15

- on dispose dans ledit contenant au moins un matériau particulaire, relativement dur, et
 substantiellement inerte par rapport au matériel nucléique,
 - on soumet le mélange de l'échantillon biologique et du matériau particulaire à un mouvement,

caractérisé en ce que, en combinaison:

- le mouvement choisi est de type vortex, et répond aux conditions suivantes:
 - le matériau particulaire est constitué de billes de diamètre compris entre 90 et 150 μm , et
- le volume apparent des billes , Vb, et le volume 30 de l'échantillon liquide, Ve, sont liés par la relation Ve = α .Vb, avec α compris entre 1,4 et 10 lorsque le contenant est de forme tubulaire, et α est inférieur ou égal à 2,1 lorsque le contenant est de forme disque,

moyennant quoi, sans ajout de réactif et/ou étape 35 opératoire supplémentaire, on libère directement dans le

milieu liquide le matériel nucléique à l'état natif et accessible à tout réactif.

Un second objet selon l'invention est un procédé de lyse d'un échantillon biologique comprenant au moins un micro-organisme de type levure, pour libérer au moins un matériel nucléique d'intérêt appartenant audit micro-organisme, selon lequel:

- on dispose dans un contenant ledit échantillon biologique en milieu liquide,
- on dispose dans ledit contenant au moins un matériau particulaire, relativement dur, et substantiellement inerte par rapport au matériel nucléique,
- on soumet le mélange de l'échantillon biologique 15 et du matériau particulaire à un mouvement,

caractérisé en ce, que en combinaison:

le mouvement choisi est de type vortex, et répond aux conditions suivantes:

- le matériau particulaire est constitué de billes 20 ayant un diamètre d'environ 500 μm , et
- le volume apparent des billes , Vb, et le volume de l'échantillon liquide, Ve, sont liés par la relation Ve = α.Vb, avec α compris entre 1,4 et 10 lorsque le contenant est de forme tubulaire, et α inférieur ou égal à 2,1 lorsque le contenant est de forme disque,

moyennant quoi, sans ajout de réactif et/ou étape opératoire supplémentaire, on libère dans le milieu liquide le matériel nucléique à l'état natif et accessible à tout réactif.

Par le procédé selon l'invention, on obtient le matériel nucléique à l'état natif, ce qui veut dire qu'il est pour l'essentiel non détérioré, par exemple non dénaturé, ou qu'il conserve pratiquement toutes les caractéristiques ou propriétés qu'il avait au sein de la 35 cellule ou organisme dont il est extrait.

7

Par ailleurs, le procédé selon l'invention est suffisamment efficace pour permettre la lyse d'un seul micro-organisme, ce qui pour beaucoup de procédés d'analyse biologique, notamment pour les techniques d'amplification ou d'analyse par hybridation de sonde(s) nucléique(s) revêt un intérêt particulier.

S'agissant du matériel nucléique, la présente invention apporte l'avantage déterminant de libérer ledit matériel de manière directement accessible pour tout 10 protocole postérieur le concernant, par exemple une ou des amorces d'amplification, une ou des sondes d'hybridation...

Par conséquent, selon la présente invention, l'échantillon biologique lysé obtenu, peut être traité 15 directement, c'est à dire sans étape opératoire intermédiaire, ou sans réactif ajouté, selon protocole opératoire en relation avec le matériel d'intérêt nucléique libéré, tel que amplification, analyse, etc., avec tous réactifs nucléiques appropriés, 20 ou autres.

Dans un mode de réalisation préféré selon le premier objet de l'invention, le matériau particulaire est constitué de billes de diamètre d'environ 100 μm , pour un micro-organisme du type bactérie.

Dans un autre mode de réalisation selon le premier ou second objet de l'invention, le mouvement de type vortex répond en outre à la relation suivante:

Vb < Ve < Vc, selon laquelle

 $Vc = \beta.Ve$, et

 β est supérieur ou égal à 2,5, avec Vc le volume 30 utile du contenant.

Les contenants que l'on peut utiliser selon l'invention peuvent être de formats différents, par exemple de forme tubulaire ou de forme disque.

On préfère que le contenant soit de forme 35 tubulaire, de préférence à fond en forme de U. Dans ce

8

mode de réalisation préféré, β est un nombre compris entre 2.5 et 30.

Dans encore un autre mode de réalisation selon l'invention, les contenants sont de forme disque et de forme tubulaire à fond en forme de U (comme par exemple de type Falcon®) ou à fond tronconique (comme par exemple de type Eppendorf®).

Lorsque le contenant est sous forme disque, α est un nombre inférieur ou égal à 2,1, de préférence inférieur 10 ou égal à 1,4 et β est un nombre supérieur ou égal à 9,3.

On préfère que le contenant soit un tube à fond tronconique tel qu'un tube Eppendorf, α étant compris entre 1,4 et 10, de préférence entre 1,4 et 3,3, et β étant compris entre 2,5 et 30, de préférence entre 2,5 et 15, de préférence encore entre 3,75 et 15.

On préfère encore que le contenant soit un tube à fond en U, tel qu'un tube Falcon, α étant compris entre 1,4 et 10, de préférence entre 1,4 et 3,3, de préférence encore est égal à 3,3, et β étant compris entre 3 et 30, de préférence entre 12 et 30, de préférence encore est égal à 20.

Dans encore un autre mode de réalisation selon l'invention, le matériau particulaire comprend d'autres billes ayant un diamètre supérieur à celui desdites 25 billes. On préfère que le contenant comprenne jusqu'à 16, de préférence 10 autres billes. On préfère encore plus que ces autres billes aient un diamètre environ de 2 à 3 mm.

Cette caractéristique complémentaire du procédé selon l'invention permet, pour une efficacité équivalente, 30 en particulier de diminuer ou limiter le temps requis pour la lyse de l'échantillon biologique.

Cette caractéristique complémentaire permet aussi de rompre des échantillons biologiques complexes, tels que tissus vivants, avant la lyse proprement dite.

Dans encore un autre mode de réalisation selon l'invention, on peut ajouter à l'échantillon biologique

9

une substance anti-mousse à une concentration finale de 0,01 à 1% en volume, de préférence de 0,5 à 1% du volume de l'échantillon liquide, Ve.

On peut encore, selon un autre mode de 5 réalisation, ajouter à l'échantillon biologique un détergent de type anionique à une concentration finale de 2,5% du volume de l'échantillon liquide, Ve.

Dans un mode de réalisation préféré selon le premier objet de l'invention, le temps de mise en mouvement de type vortex est au moins égal à 10 secondes, de préférence au moins 20 secondes, avantageusement entre 1 et 5 minutes.

Le temps de vortex est adapté de manière à obtenir un pourcentage de lyse au moins supérieur ou égale à 20%.

On préfère encore, selon les spécificités du protocole de lyse utilisé, notamment lorsqu'on ajoute des billes de plus gros diamètre, que le temps de mise en mouvement de type vortex soit d'environ 2 minutes.

Dans un mode de réalisation préféré selon le 20 second objet de l'invention, le temps de mise en mouvement de type vortex est compris entre 8 et 20 minutes.

Etant donné que le lysat obtenu permet directement de détecter et/ou quantifier et/ou amplifier le matériel nucléique d'intérêt, la présente invention concerne 25 également un procédé de traitement d'un échantillon biologique comprenant un micro-organisme comportant un matériel nucléique d'intérêt, ledit procédé comprenant:

- a) une étape de lyse, selon laquelle:
- on dispose dans un contenant ledit échantillon 30 biologique en milieu liquide,
 - on dispose dans ledit contenant au moins un matériau particulaire, relativement dur, et substantiellement inerte par rapport au matériel nucléique,

WO 99/15621

5

10

10

PCT/IB98/01475

- et on soumet le mélange de l'échantillon biologique et du matériau particulaire à une mise en mouvement du type vortex, selon laquelle en combinaison:

- les billes ont un diamètre compris entre 90 et 150 μ m pour un micro-organisme de type bactérie, et d'environ 500 μ m pour un micro-organisme de type levure,

- le volume apparent des billes, Vb, et le volume de l'échantillon liquide, Ve, sont liés par la relation Ve = α Vb, avec α compris entre 1,4 et 10 lorsque le contenant est de forme tubulaire, et α est inférieur ou égal à 2,1, lorsque le contenant est en forme de disque,

b) on soumet l'échantillon biologique lysé, avec ou sans le matériau particulaire ayant servi à la lyse, directement à un protocle opératoire concernant 15 spécifiquement le matériel nucléique d'intérêt par exemple amplification et/ou détection et/ou quantification nucléique.

Ainsi, par exemple après amplification, on peut détecter au moins 1.10^2 cellules/ml.

Un troisième objet selon l'invention est un contenant à usage unique, pour la mise en oeuvre d'un procédé décrit précédemment, caractérisé en ce qu'il comprend une charge d'un matériau particulaire adaptée, en fonction d'un volume prédéterminé de l'échantillon biologique, à la mise en oeuvre directe du procédé décrit précédemment.

Par "échantillon biologique", on entend tout fraction d'un matériel échantillon, prélèvement ou simple ou complexe, par exemple un tissu biologique, 30 vivant ou un liquide ou fluide corporel. Cet échantilon biologique contient au moins un micro-organisme à lyser, traitement préalable de la structure sans comprenant ledit micro-organisme, par exemple destruction de l'organisation du tissu.

Par "micro-organisme", on entend tout matériau biologique, comprenant naturellement une membrane ou

enveloppe fermée, un ou plusieurs constituants biologiques d'intérêt, sub-cellulaires, renfermés à l'intérieur de ladite membrane ou enveloppe, à savoir nucléiques (ADN ou ARN). A titre d'exemple, on peut citer bien entendu les micro-organismes procaryotes, tels que les bactéries et archaebactéries, les micro-organismes eucaryotes tels que les cellules végétales ou animales, les levures et les champignons, également différents tissus vivants, et par extension des particules virales.

Par le terme "lyse", on entend tout processus permettant de rompre la membrane ou l'enveloppe précitée pour libérer le matériel nucléique d'intérêt, sous forme totale ou partielle.

Les figures et les exemples qui suivent permettent 15 d'illustrer l'objet de l'invention, mais ne limitent en rien la portée de celle-ci.

La figure 1 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnée) en fonction du diamètre des billes (en abscisse), et de la composition du mélange (nature et 20 proportion des billes).

"SI " signifie " solution initiale " et représente le témoin qui n'a pas été lysé.

A : Billes de verre de 1 à 50 $\mu \mathrm{m}$

B : Billes de verre de 50 à 100 μm

C : Billes de verre de 90 à 150 μm

D : Billes de verre 100 $\mu\mathrm{m}$

25

E : Billes de zirconium 100 μ m

F : Billes de zirconium 500 μ m

G : Mélange 50/50 de billes de zirconium de 100 et 30 500 $\mu \text{m}.$

La figure 2 illustre la quantité d'acides nucléiques de *S.epidermidis* détectée (en ordonnée) en fonction du diamètre des billes (en abscisse).

"SI" signifie "solution initiale" et 35 représente le témoin qui n'a pas été lysé.

A : Billes de verre de 1 à 50 μm

5

10

25

B : Billes de verre de 50 à 100 μm

C : Billes de verre de 90 à 150 $\mu \mathrm{m}$

D : Billes de verre 100 μ m

E : Billes de zirconium 100 μ m

F: Billes de zirconium 500 μ m

G : Mélange 50/50 de billes de zirconium de 100 et 500 $\mu\mathrm{m}$.

La figure 3 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnées) en tube Eppendorf en fonction du coefficient a (en abscisse).

La figure 4 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnées) en tube Falcon en fonction du coefficient a (en abscisse).

La figure 5 illustre le pourcentage de lyse (en 15 ordonnées) dans un contenant en forme de disque en fonction du coefficient a (en abscisse).

La figure 6 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnées) en tube Eppendorf en fonction du coefficient b (en abscisse).

20 La figure 7 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnées) en tube Falcon en fonction du coefficient b (en abscisse).

La figure 8 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnées) dans un contenant en forme de disque en fonction du coefficient b (en abscisse).

La figure 9 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnées) en fonction de la géométrie du contenant (en abscisse).

A: tube Eppendorf à fond en forme de V. Vc = 1,530 ml

B : cuvette de spectrophotométrie à fond plat, Vc = 5 ml

C: tube à fond plat, Vc = 30 ml

D: tube à fond plat, Vc = 60 ml

F: bouteille de verre à fond plat, Vc = 25 ml

13

G : tube en polystyrène à fond en forme de U, Vc = 6 ml

H: tube en polystyrène à fond en forme de U, Vc = 14 ml

5 I : tube en polystyrène à fond en forme de U, Vc = 22 ml

J : tube en polypropylène à fond en forme de U, Vc

K : tube en polypropylène à fond en forme de U, Vc

10 = 14 ml

= 6 ml

L : tube en polypropylène à fond en forme de U, Vc = 22 ml

 ${\tt M}$: tube en polypropylène à fond en forme de U, Vc = 4 ml.

La figure 10 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnées) en fonction de différentes billes ajoutées (en abscisse).

La figure 11 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnées) en fonction de combinaisons de différentes 20 billes ajoutées (en abscisse).

A : 10 billes inox de diamètre 2 mm

B: 10 billes de verre de diamètre 3 mm

C : 5 billes inox et 5 billes de verre de diamètres respectifs 2 et 3 mm

D: 4 billes inox et 4 billes de verre de diamètres respectifs 2 et 3 mm

E: 5 billes inox et 3 billes de verre de diamètres respectifs 2 et 3 mm

F: 3 billes inox et 5 billes de verre de 30 diamètres respectifs 2 et 3 mm.

La figure 12 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnées) en fonction du temps de mise en mouvement de type vortex (en abscisse) pour les protocoles I et II de l'exemple 5.

35 La figure 13 illustre le pourcentage de lyse (en ordonnées) en fonction du temps de mise en mouvement de

25

35

type vortex (en abscisse) pour les protocoles II et III de l'exemple 5.

Afin de déterminer l'efficacité du procédé de lyse 5 selon l'invention, on a mis au point un protocole test général d'analyse du lysat obtenu en mesurant le pourcentage de lyse.

Ce protocole général est décrit ci-après.

bactéries à paroi Gram+ Staphylococcus 10 epidermidis (bioMérieux référence API Νο 8149310) cultivées en milieu liquide BCC (Bouillon Coeur Cervelle) sont centrifugées à 2500 tours/minute pendant 10 minutes à 25°C, avant d'être resuspendues indifféremment en milieu BCC ou en tampon de lyse à la concentration 5.109 cellules 15 /300 μ l. La composition du tampon de lyse est la suivante: 30mM Tris-Hcl, 5mM EDTA, 100 mM NaCL, pH 7.2. 300 μ l de la ajoutés dans un tube suspension sont préalablement un volume défini de billes de verre. Le tube fermé est mis en mouvement de type vortex pendant 2 minutes, à puissance maximale de l'appareil (Reax 2000, 20 Heidolph). La suspension bactérienne ainsi traitée est conservée dans la glace avant analyse.

Le pourcentage de lyse est déterminé immédiatement après recueil de l'échantillon, par mesure de la densité optique à 550 nm. Le pourcentage de lyse est égal au rapport de la valeur de DO à 550 nm de la solution bactérienne après vortex sur la valeur de DO à 550 nm avant vortex.

La qualité des acides nucléiques libérés par 30 l'étape de vortex est vérifiée sur gel d'agarose 0,8%. 10 μl du lysat sont déposés par puits, la migration est réalisée sous voltage constant (150V) et le gel est coloré au bromure d'éthidium (BET) avant observation sous rayonnement ultra-violet.

La quantité d'acides nucléiques libérés par l'étape de vortex est déterminée par détection spécifique

PCT/IB98/01475

technique d'hybridation dite sandwich selon la utilisant l'appareil Vidas® commercialisé par bioMérieux (France). Des sondes oligonucleotidiques de capture et de détection spécifiques des acides nucléiques 5 epidermidis (voir le brevet EP 0632269) ont été choisies. Les oligonucleotides de capture et de détection ont respectivement pour séquence : 5'-GACCACCTGTCACTCTGTCCC-3' (SEQ ID N°:1) et 5'GGAAGGGGAAAACTCTATCTC-3' (SEQ ID N°:2). La sonde de détection est marquée par couplage avec la 10 phosphatage alcaline (PA). L'hybridation spécifique de ces sondes avec les acides nucléiques libérés dans le lysat est fonction de la quantité d'acides nucléiques présents, mais aussi leur accessibilité de pour les utilisées.

Deux protocoles d'amplification spécifiques des molécules d'ADN et d'ARN de S. epidermidis ont été réalisés à partir des lysats recueillis pour vérifier si les acides nucléiques libérés par vortex peuvent être amplifiés : un protocole PCR pour l'amplification de l'ADN et un protocole NASBA pour l'amplification de l'ARNr16S.

<u>Protocole</u> PCR : la technique de PCR suivie est celle décrite par Goodman dans PCR stratégies, Ed : Innis, Gelford et Sninsky Académie press 1995, pp 17-31. Deux amorces d'amplification ont été utilisées, elles présentent les séquences suivantes

Amorce 1: 5'-ATCTTGACATCCTCTGACC-3' SEQ ID N°:3

Amorce 2: 5'-TCGACGGCTAGCTCCAAAT-3' SEQ ID N°:4

Les cycles de température suivants ont été

utilisés

30	1 fois	3 minutes	94°C
		2 minutes	65°C
	35 fois	1 minute	72°C
		1 minute	94°C
		2 minutes	65°C
35	1 fois	5 minutes	72°C

<u>Protocole</u> NASBA: la technique de NASBA suivie est celle décrite par Van der Vliet et al., J. Gen. Microbiol. 1993, 139 : 2423. Deux amorces d'amplification ont été utilisées, elles présentent les séquences suivantes:

Amorce 1: 5'-GGTTTGTCACCGGCAGTCAACTTAGA-3'
Amorce 2: 5'-TCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCA-3'

10 μl de lysat ou 5 μl de lysat sont utilisés pour chaque essai PCR et NASBA, respectivement. Les amplicons 10 produits par PCR sont observés sur gel d'agarose 0.8% et quantifiés sur Vidas selon le protocole décrit ci-dessus. Les amplicons produits après NASBA sont détectés et quantifiés sur microplaque par hybridation avec une sonde de capture et une sonde de détection spécifique de S. 15 epidermidis, selon la méthode décrite par P. Cros et al., Lancet 1992, 240 : 870. La sonde de détection est couplée à la peroxidase de Raifort (HRP). Les deux sondes présentent les séquences suivantes :

Sonde de capture: 5'-GATAGAGTTTTCCCCTTC-3' (SEQ ID 20 N°: 7)

Sonde de détection: 5'-GACATCCTCTGACCCCTC-3' (SEQ ID N°: 8)

Exemple 1 : Influence du diamètre des billes et du 25 coefficient a sur l'efficacité de la lyse par vortex

a- Influence du diamètre des billes.

Le protocole de lyse a été réalisé comme décrit 30 ci-dessus à partir d'une suspension initiale de Staphylococcus epidermidis $(5.10^9\ cellules/300\ \mu l)$ en présence de 90 μl de différents mélanges de billes caractérisées par des diamètres différents, pendant 2 minutes par essai. Les diamètres testés sont compris entre 35 1 et 500 μm ; les mélanges testés sont les suivants :

17

A : microbilles de verre de diamètre compris entre 1 et 500 μm ,

B : microbilles de verre de diamètre compris entre 50 et 100 μm ,

5 C: microbilles de verre de diamètre compris entre 90 et 150 μm ,

D : mélange homogène de billes de diamètre 100 μ m,

E : mélange homogène de billes de zirconium de diamètre 100 $\mu\mathrm{m}$

10 F: mélange homogène de billes de zirconium de diamètre 500 μm

G : mélange (50/50 v/v) de billes de zirconium de diamètre 100 et 500 $\mu m\,.$

Comme l'indique la figure 1, la lyse cellulaire obtenue est la plus efficace en présence de billes de diamètre compris entre 90 et 150 μ m, et de préférence égal à 100 μ m. Les mesures de densité optique à 550nm des échantillons recueillis après 2 minutes de vortex dans ces conditions indiquent que le pourcentage de lyse de S. 20 epidermidis est compris entre 60 et 70% avec ce diamètre billes. Seule des différences négligeables pourcentage de lyse sont observées en fonction de nature des billes (verre ou zirconium) de même diamètre. Par contre l'utilisation de billes de diamètre inférieur ou supérieur à 90 jusqu'à 150 μ m, telles les mélanges de 25 billes de diamètre 1 à 50 μ m, 50 à 100 μ m, 100 à 500 μ m, ou le mélange homogène de billes de diamètre 500 μ m entraîne une diminution du pourcentage de lyse. L'analyse sur gel d'agarose 0,8% des acides nucléiques libérés dans 30 les lysats, présentée dans la figure 2, montre que les molécules d'ADN et d'ARNr sont bien conservées puisque leur profil de migration sur gel d'agarose 0,8% est le même que celui des molécules d'ADN et ARNr bactériens acides purifiés et commercialisés. Les nucléiques 35 relarqués ont également le même profil de migration quel que soit le diamètre des billes utilisées pour la lyse

18

cellulaire. Les acides nucléiques libérés sont également détectables par analyse Vidas dont le protocole est décrit ci-dessus. Toujours d'après la figure 2, la quantité d'acides nucléiques libérés dans les lysats mesurée par analyse Vidas reflète le pourcentage de lyse obtenu. En parallèle, il a été démontré que l'ADN ou l'ARNr 16S de chaque lysat peut être amplifié par protocole PCR ou NASBA spécifiques de S. epidermidis, qui sont décrits dans la partie protocole test general ci-dessus.

10

b- Influence du coefficient α

- tube Eppendorf

Le protocole de lyse a été réalisé en présence de billes de diamètre 100 μm, pendant 2 minutes. Des tubes Eppendorfs identiques ont été utilisés pour tous les essais. Le volume de la suspension bactérienne a été fixé à 300 μl /tube pour chaque essai, et le volume de billes a varié entre 1 et 300 μl/tube. Soit Vb, le volume apparent des billes et Ve, le volume de l'échantillon liquide tel que Vb < Ve avec Ve = α.Vb avec α étant un nombre réel positif différent de 0. Le coefficient α a varié de 1 à 300. Après l'étape de vortex, les échantillons recueillis sont analysés par mesure de densité optique à 550 nm, les acides nucléiques libérés dans le lysat sont observés sur gel d'agarose 0,8% et quantifiés par analyse Vidas.

La figure 3 indique que la lyse de S. epidermidis est efficace pour des valeurs du coefficient α comprises entre 1,4 et 10 : le pourcentage de lyse est compris entre 30 30 et 70%. Pour des valeurs de α < 1,4, le volume de billes étant trop important, le volume mort de la suspension cellulaire augmente de façon telle qu'il est impossible de récupérer le volume initial de la suspension cellulaire. Pour des valeurs de α > 10, le volume de 35 billes est faible et la probabilité de rencontre et de choc mécanique entre billes et cellules est réduite. De

préférence la lyse cellulaire est plus efficace pour des valeurs de α comprises entre 1,4 et 3,3 : le pourcentage de lyse étant compris entre 40 et 70%. L'analyse sur gel lysat montre que les profils d'agarose 0,8% du 5 migration des acides nucléiques libérés ne sont pas modifiés, quelles que soient les valeurs de α. La quantité d'acides nucléiques mesurée par analyse Vidas directement corrélée au pourcentage de lyse.

10 - tube Falcon

Une même étude a été réalisée en remplaçant les tubes Eppendorf par des tubes Falcon en polypropylène (Vc = 6ml). La figure 4 indique que la lyse de S. epidermidis est efficace pour des valeurs du coefficient α comprises entre 1,4 et 10 : le pourcentage de lyse est supérieur à 20%. De préférence, la lyse cellulaire est plus efficace pour des valeurs de α comprises entre 1,4 et 3,3 : le pourcentage de lyse est compris entre 65 et 85%.

20 -forme disque

On a utilisé une carte de dimensions l = L = 8,5 cm et h = 0.4 cm. Un ou plusieurs trous, définis comme des puits, sont réalisés de hauteur constante et égale à la hauteur de la carte (soit 0.4 cm) et de diamètre constant.

25 Ces puits sont recouverts d'un film de chaque côté, et chaque puits est rempli d'un mélange de billes de diàmètre 100 μ m de volume apparent Vb, de 10 billes de fer de diamètre 2 mm et d'une suspension cellulaire de volume Ve. La carte ainsi définie est maintenue sur le vortex.

Le protocole de lyse a été réalisé pendant deux minutes. Des cartes telles que décrites ci-dessus avec un diamètre de 30 cm (Vc = 2,8 ml/puits) ont été utilisées pour chaque essai. Le volume de la suspension bactérienne a été fixée à 700 μl /puits et le volume de billes a varié de 90 à 510 μl/puits. Le coefficient α a varié de 1,4 à 7,8. Après l'étape de vortex, le pourcentage de lyse des

20

échantillons recueillis a été analysé par mesure de densité optique à 550 nm, les acides nucléiques libérés ont été observés sur gel d'agarose et quantifiés par analyse Vidas.

La figure 5 indique le pourcentage de lyse obtenu 5 en fonction du coefficient a. La lyse de S.epidermidis est efficace avec un contenant format "carte" pour des valeurs du coefficient inférieures ou égales à 2,1 : lorsque α est compris entre 1,4 et 2,1, le pourcentage de lyse est 10 compris entre 45% et 75%. De préférence, la valeur optimale du coefficient devrait être inférieure à 1,4 car même pour des valeurs de α s'approchant de 1,4, valeurs de pourcentage de lyse n'arrivent pas à un plateau. L'analyse sur gel d'agarose 0,8% du lysat montre 15 que les profils de migration nucléiques libérés ne sont pas modifiés quelles que soient les valeurs de α . La quantité d'acide nucléique mesurée par analyse Vidas est directement corrélée au pourcentage de lyse.

20 <u>Exemple 2 : influence du coefficient β sur</u> <u>l'efficacité de la lyse par vortex</u>

- Tube Eppendorf

Le protocole de lyse a été réalisé en présence d'un rapport constant entre le volume apparent de billes et le volume de l'échantillon liquide (α = Ve/Vb = 3,3) pendant 2 minutes. Le volume de la suspension bactérienne a varié entre 100 μ l et 1 ml. Soit Ve, le volume de l'échantillon liquide et Vc, le volume utile ou disponible du contenant tel que Ve < Vc et Vc = β .Ve avec β étant un nombre réel positif supérieur à 0, le coefficient β a varié de 1,5 à 15. Les expériences ont été réalisées en tube Eppendorf, soit Vc = 1,5ml. Après l'étape de vortex, les échantillons recueillis sont analysés par mesure de densité optique à 550 nm, les acides nucléiques dans le

21

lysat sont observés sur gel d'agarose 0,8% et analysés par analyse Vidas.

Sur la figure 6 est indiqué le pourcentage de lyse obtenu en fonction du coefficient β. La lyse de 5 epidermidis est plus efficace pour des valeurs du coefficient β compris entre 2,5 et 15 : le pourcentage de supérieur à 30%. Pour des valeurs inférieures à 2,5, les volumes de billes et d'échantillon liquide sont trop importants; ils limitent le mouvement 10 des billes dans l'échantillon et le volume l'échantillon augmente. Pour des valeurs de β supérieures à 15, le volume de l'échantillon est trop faible pour permettre une récupération complète du volume initial de la suspension cellulaire pour $\alpha = 3.3$. De préférence, 15 l'efficacité de lyse cellulaire est meilleure pour des valeurs de β comprises entre 3,75 et 15 : le pourcentage de lyse est compris entre 35 et 60%; de préférence pour des valeurs comprises entre 7,5 et 15 (40 à 60% de lyse). L'analyse sur gel d'agarose 0,8% des lysats montre que les 20 profils de migration des acides nucléiques libérés sont les mêmes quelles que soient les valeurs de β . quantités d'acides nucléiques mesurées par analyse Vidas sont directement corrélées aux pourcentages obtenus.

25

- tube Falcon

Une étude similaire a été réalisée en utilisant des tubes Falcon de polypropylène (Vc = 6ml) à la place des tubes Eppendorf. Une même valeur du coefficient α a 30 été fixée (α = 3,3). Le volume de la suspension bactérienne a varié entre 200 μl et 2ml. β a varié de 3 à 30. La figure 7 illustre le pourcentage de lyse obtenu en fonction du coefficient β. La lyse de S. epidermidis est plus efficace pour des valeurs de β comprises entre 6 et 35 30 : le pourcentage de lyse est supérieur à 50%. Pour des valeurs de β > 30, le volume de l'échantillon est trop

22

faible pour permettre une récupération complète du volume initial de la suspension cellulaire, pour $\alpha = 3,3$. De préférence, l'efficacité de la lyse cellulaire est meilleure pour des valeurs de β comprises entre 12 et 30 : le pourcentage de lyse est supérieur à 60%.

-forme disque

Le protocole de lyse a été réalisé avec le même contenant utilisé dans l'exemple 1 (diamètre des puits 30 10 mm, vc = 2,8 ml), avec une valeur de coefficient α (α = 3,3) pendant deux minutes. Le volume de la suspension bactérienne a varié de 300 à 700 μ l/puits. Le coefficient β a varié de 4 à 9,3. Après l'étape de vortex, le pourcentage de lyse des échantillons recueillis a été 15 analysé par mesure de densité optique à 550 nm, les acides nucléiques libérés on été observés sur gel d'agarose et quantifiés par analyse Vidas.

Sur la figure 8 est indiqué le pourcentage de lyse du coefficient β. La lyse obtenu en fonction 20 S.epidermidis est efficace en contenant "format carte" pour des valeurs de β supérieures ou égales à 9,3. Lorsque β est égal à 9,3 avec une valeur non optimale de α (α = 60% des cellules sont lysées. l'analyse sur gel lysat montre que les profils d'agarose 0,8% du 25 migration des acides nucléiques libérés ne sont pas modifiés quelles que soient les valeurs de β et sont similaires à ceux décrits pour le format tube. la quantité d'acides nucléiques mesurée par analyse Vidas est corrélée au pourcentage de lyse pour chaque essai.

30

Exemple 3 : Influence de la géométrie du tube sur l'efficacité de la lyse par vortex

Le protocole de lyse a été réalisé dans des 35 contenants de différentes géométries et différents volumes (Vc), en présence de 300 μ l de suspension cellulaire et 90

 μ l de billes de diamètre 100 μ m pendant 2 minutes (soit α = 3,3 et β variable).

A : tube Eppendorf en polypropylène à fond en forme de V, Vc = 1,5 ml

B : cuvette de spectrométrie en polypropylène à fond plat, Vc = 5 ml

C: tube à fond plat, Vc = 30 ml

D: tube à fond plat, Vt = 60 ml

E = bouteille de verre à fond plat, Vc = 8 ml

F = bouteille de verre à fond plat, Vc = 25 ml

G = tube en polystyrène à fond en forme de U, $Vc = 6 \ ml$

H = tube en polystyrène à fond en forme de U, Vc =

I = tube en polystyrène à fond en forme de U, Vc = 22 ml

 $\mathtt{J}=\mathtt{tube}$ en polypropylène à fond en forme de U, Vc = 6 ml

K = tube en polypropylène à fond en forme de U, Vc = 14 ml

L = tube en polypropylène à fond en forme de U, Vc = 22 ml

M = tube en polypropylène à fond en forme de U, Vt 20 = 4 ml.

La figure 9 indique le pourcentage de lyse obtenu en fonction de la géométrie du contenant utilisé. Le pourcentage de lyse est compris en moyenne entre 60 et 75% avec les tubes à fond plat ou à fond en forme de V, par contre il est compris en moyenne entre 70 et 80% avec les tubes à fond en forme de V pour un même temps de vortex et une même valeur de α . La mesure par analyse Vidas de la quantité d'acides nucléiques libérés confirme cette influence.

30

10

14 ml

Exemple 4 : influence de l'ajout de billes de plus gros diamètre sur l'efficacité de la lyse par vortex

Le protocole de lyse a été réalisé en tube Eppendorf, en présence de 300 μ l de suspension cellulaire et 90 μ l de billes de diamètre 100 μ m (soit α = 3,3 et β = 5) pendant deux minutes. Différentes billes on été ajoutées au milieu en combinaison : billes de fer de diamètre 2 mm, billes de verre de diamètre 3 mm.

La figure 10 présente le pourcentage de lyse de S.epidermidis en fonction des différentes combinaisons de 10 billes ajoutées. L'addition de bille de fer ou de billes de verre entraine une augmentation du pourcentage de lyse. Ce pourcentage est sensiblement meilleur en présence de jusqu'à 10 billes/tube. la présence de ces 10 billes ne gêne pas le mouvement des billes de diamètre 100 μ m; par contre au delà de cette valeur, le mouvement est gêné. Le 15 pourcentage de lyse obtenu est plus élevé en présence d'un même nombre de billes de verre par essai que de billes de fer. D'après la figure 11, l'addition de combinaison de billes de fer et de verre permet d'obtenir un pourcentage de lyse aussi élevés qu'en présence de l'addition d'un 20 mélange homogène de billes pour chaque combinaison testée; le pourcentage de lyse est supérieur à 80%. L'analyse sur gel d'agarose 0,8% des acides nucléiques libérés montre que les molécules d'ADN et d'ARNr ont le même profil de migration après lyse quelles que soient les combinaisons 25 des billes utilisées. L'addition des billes de fer et de verre n'altère pas la structure du matériel nucléique libéré. De plus il a été vérifié que leur présence dans le lysat ne perturbe pas les réactions d'amplification PCR et NASBA. 30

Exemple 5 : Influence du temps de vortex sur l'efficacité de la lyse par vortex

35 Trois protocoles de lyse ont été réalisés en parallèle:

25

- <u>Protocole I</u>: tube Eppendorf Vc = 1,5 ml, 90 μ l de bille de diamètre 100 μ m et 300 μ l de suspension cellulaire α = 3,3 et β = 5).

- <u>Protocole II</u>: protocole I avec addition de 3 5 billes de verre de diamètre 3 mm et 5 billes de fer de diamètre 2 mm.

- <u>Protocole III</u>: protocole II/en tube Falcon (Vc = 6ml) à la place des Eppendorfs.

Pour chaque protocole, différents temps de vortex 10 ont été réalisés.

15

La figure 12 présente le pourcentage de lyse obtenu en fonction du temps de vortex, pour les protocoles I et II. Les conditions expérimentales du protocole I ne sont pas optimales. On confirme qu'après 2 minutes de vortex, seulement 60% des bactéries S. epidermidis sont lysées. Par contre il est possible d'améliorer l'efficacité du protocole malgré ces conditions optimales en augmentant le temps de vortex : dès 8 minutes de vortex, 85% des bactéries sont lysées. Les conditions expérimentales du protocole II sont plus optimales que celles du protocole I, dû à l'addition de billes de diamètre 3 mm : dans ces conditions, 85% des bactéries S. epidermidis sont lysées dès 4 minutes de vortex.

La figure 13 présente le pourcentage de lyse obtenu en fonction du temps de vortex pour les protocoles II et III. Les conditions expérimentales du protocole III sont plus optimales que celles du protocole II : 88% des bactéries S. epidermidis sont lysées après seulement 2 minutes de vortex alors que seulement 80% ou 60% des 30 bactéries après 2 minutes avec le protocole II ou I, respectivement. La mesure par analyse Vidas des acides nucléiques libérés confirme ces principales observations.

Ainsi, augmenter le temps de vortex permet d'obtenir un pourcentage de lyse élevé lorsque les conditions expérimentales initiales ne sont pas optimales

.Parallèlement, lorsque ces conditions sont optimales, le temps de vortex peut être court (2 minutes).

Exemple 6 : Universalité du protocole de lyse selon l'invention

Le procédé de lyse selon l'invention peut être appliqué à d'autres espèces cellulaires. Pour cela, le protocole a été réalisé en tube Eppendorf en présence de 300 μ l de suspension cellulaire de concentration 1.10 9 10 cellules /ml, de 90 μ l de billes de diamètre 100 μ m avec un temps de vortex égal à 8 minutes. Différentes cellules ont été respectivement utilisées (Mycobacterium gordonae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae, Bacillus stearothermophilus, Micrococcus sp., 15 Actinomyces viscosus, Actinomyces naeslundii, mucilaginosus, asteroides, Stomatococcus Nocardia Rhodococcus sp.). Les résultats obtenus indiquent que le pourcentage de lyse pour chacun des cas analysés est compris entre 80 et 90%. Les profils de migration sur gel 20 d'agarose 0,8% des acides nucléiques libérés dans chaque lysat sont similaires pour chaque souche bactérienne testée, et sont similaires à celui d'ADN et ARNR 16S d'E. coli purifiés et commercialisés.

25 <u>Exemple 7 : Lyse de levure</u>

Espèce testée: Candida albicans

Contenant: Tube Falcon en polypropylène de Vc = 6 ml.

30 Echantillon ajusté à 0.5 McFarland, soit 3.106 levures/ml.

Volume échantillon: Ve = 600 μ l

Volume apparent des billes: Vb (μ l, variable): 60, 90 et 180 μ l.

35 Diamètre des billes en verre testées (μ):100, 500et 1500 μ m.

1.

1500

27

L'efficacité de lyse est mesurée d'après le pourcentage de lyse:

% de lyse = D0550 (avant lyse) - D0550 (aprrès
lyse) / D0550 (avant lyse

5 Durée du vortex: 2 à 20 mn

Résultats

Diamètre billes	(μ) Vb (μ1)	Durée du vortex (mn)	% de lyse
100	90	2	0
100	90	8	0
1500	90	2	0
1500	90	8	30

90

On démontre qu'un diamètre de 100 $\mu\mathrm{m}$ est 10 insuffisant.

20

36

Diamètre billes (μ)	Vb (μ1)	Durée du vortex (mn)	% de lyse
1500	180	8	30
1500	180	20	29
1500	60	8	33

On démontre qu'avec un diamètre de billes de 1500 μm , on atteint un pourcentage de lyse d'environ 30%, pour 15 un Vb compris entre 60 et 180 et avec une durée de vortex entre 8 et 20mn.

PCT/IB98/01475

Diamètre billes (μ)	Vb (μ1)	Durée du vortex (mn)	% de lyse
500	60	8	52
500	60	20	58
500	180	20	71

On démontre qu'un diamètre de 500μ permet d'obtenir un pourcentage de lyse de plus de 50%, avec un Vb de 60 à $180\mu l$ et une durée de vortex de 8 à 20mn.

Conclusion:

Des billes de 500 μm de diamètre, avec une durée de vortex comprise entre 8 et 20 mn sont nécessaires comme paramètre en combinaison avec le mouvement de type Vortex pour lyser des levures.

10

5

Exemple 8 : Sensibilité du protocole de lyse selon l'invention

Les acides nucléiques ADN et ARNr 165 libérés par lyse selon le procédé de l'invention ont été soumis à une amplification. Les conditions de lyse sont les mêmes que celles indiquées dans l'exemple 6. La souche bactérienne utilisée est s. epidermidis. Deux d'amplification spécifiques des acides nucléiques de S. été réalisés à partir epidermidis ont 20 recueillis, soit un protocole PCR pour l'amplification de l'ADN, soit une protocole NASBA pour l'amplification de l'ARNr 16S, comme décrits ci-dessus dans le protocole test général.

1) - Amplification PCR de l'ADN libéré

25

Des concentrations initiales de 1. 10^9 à 1. 10^2 cellules /ml ont été utilisées. 10 μ l de lysat ont été utilisés pour chaque essai PCR. Les amplicons produits ont

29

été détectés et quantifiés après hybridation sandwich spécifique sur Vidas, comme décrit dans le protocole test général. Les amplicons produits sont mesurables pour des concentrations bactériennes initiales au moins supérieures ou égales à 1.10² cellules /ml, soit 30 cellules /300 µl. Ainsi le protocole de lyse optimisé par vortex est efficace pour lyser au moins 30 cellules /300 µl et pour libérer des molécules d'ADN amplifiables par PCR de sorte que la quantité d'amplicons produits soit détectables.

10

2) - Amplification NASBA de l'ARNr 16S

Des concentrations initiales de 2.10⁹ à 2.10² cellules /ml ont été utilisées. 5 μ l de lysat ont été utilisés pour chaque essai NASBA. Les amplicons produits 15 détectés et quantifiés sur microplaque par hybridation sandwich avec des sondes oligonucléotidiques spécifiques de S. epidermidis, comme décrit dans protocole test général. Les amplicons produits ont pû être détectés et mesurés pour des concentrations bactériennes initiales au moins supérieures ou égales à 2.10² cellules 20 /ml, soit 60 cellules /300 μ l. La quantité d'amplicons mesurée est importante pour cette concentration initiale, ce qui indique que probablement des amplicons produits lyse bactéries de concentration de 25 inférieure à 60 cellules /300 µl seraient détectables et mesurables.

Exemple 9 : Résolution de la formation de mousse issue de l'agitation de billes dans un échantillon.

A des fins d'automatisation, il est capital de 30 résoudre et d'empêcher la formation de mousse dans les liquides, ce qui perturbe voire empêche les étapes de transfert par pipettage. Des agents "antimousse "ont été étudiés quant à leur capacité à limiter ce type de phénomène. Pour ce faire, un protocole a été validé à

30

partir d'échantillons respiratoires (crachats, expectorations, lavages broncho-alvéolaires) fluidifiés et inactivés selon le protocole "NaLc". Brièvement, 2 ml d'échantillon sont ajoutés à 2 ml de solution antiseptique (obtenue par dissolution de 0,75 g de N-actétyl-L-Cystéine dans 150 ml de soude 4%). Le mélange est vortexé et laissé sous agitation pendant 20 minutes à température ambiante, puis neutralisé par 41 ml de tampon phosphate (pH 6,8). L'ensemble est vortexé 15 secondes puis centrifugé à 4°C pendant 25 minutes à 4000 g. Le culot est resupendu (vortex, 15 secondes) dans 2 ml residuels après avoir éliminé le surnageant.

Différents échantillons sont ensuite mélangés afin de disposer d'un milieu homogène et constant pour l'étude. 15 Les essais sont réalisés de la manière suivante : 260 μ l d'échantillons sont ajoutés dans un tube polypropylène 12 x 75 mm avec 90 μ l de billes de verre de diamètre 100 μ m, 3 billes de verre de diamètre 2 mm, 5 billes de fer de diamètre 2 mm. 40 μ l d'un détergent anionique sont ajoutés 20 afin d'obtenir une concentration finale de 2,5 %. La présence d'un détergent est justifiée par le fait de stabiliser et de protéger les acides nucléiques lors du processus de lyse.

L'ensemble est agité dans un vortex Reax 2000 à la puissance maximale pendant 12 minutes 25 (Heidolph) (temps particulièrement long par rapport au protocole standard, mais qui doit favoriser la formation éventuelle de mousse le cas échéant). La hauteur du liquide dans le tube est mesurée initialement puis après agitation et le exprimé dans les pourcentage de mousse obtenu est résultats suivants en faisant le rapport de la hauteur de mousse sur la hauteur initiale.

Tableau N

Concentration antimousse (%)	Génération de mousse (%)
0	22 %
0.01	11 %
0.03	11 %
0.1	11 %
0.5	0 %
1 %	0 %

L'agent antimousse, en particulier le Foam Ban MS-575 (Ultra Inc., Charlotte, USA) est ajouté sous un volume négligeable, afin d'obtenir des concentrations finales de 5 0,01 à 1 % (Tableau N).

Les résultats (voir Tableau N) montrent que la présence d'un antimousse permet la résolution de la formation de mousse, notamment à partir d'échantillons cliniques tels que les sédiments. Son utilisation à une 10 concentration de 0,5 à 1 % permet de résoudre totalement la formation de mousse issue de l'agitation de l'échantillon liquide en présence de billes.

L'efficacité de l'antimousse a également été vérifiée à partir d'échantillons individuels (non 15 mélangés), à la concentration finale de 0,6 %, selon le protocole décrit précédemment.

Les résultats (voir Tableau N+1) montrent que la genèse de mousse est variable selon les échantillons biologiques, mais que la présence d'antimousse au sein du

protocole de lyse, résout et empêche la formation de mousse à partir de différents échantillons respiratoires.

Tableau N + 1

Echantillon	Génération de mousse (%)		
	avec mousse	sans mousse	
2675 6/2	0%	16%	
2677 6/2	. 0%	16%	
2654 6/2	0%	16%	
2673 6/2	0%	22%	
3609 71	0%	11%	
3673 92	0%	16%	

5 <u>Exemple 10 : Sensibilité du protocole de lyse de</u> microorganismes en présence d'agents antimousse

L'efficacité de l'ensemble du protocole de lyse, notamment en présence d'antimousse, a été évaluée sur des échantillons contenant de très faibles concentrations de la bactéries. La bactéries Mycobacterium bovis BCG a été utilisée, car le genre Mycobacterium est connu comme étant difficile à lyser, et particulièrement recherché dans les prélèvements respiratoires.

Des dilutions en cascade, à partir d'une 15 suspension initiale homogène de bactéries dont la concentration a été déterminée par mesure densitométrique (Densité Optique à 550 nm) ont été réalisées afin d'inoculer sous un volume négligeable des fractions de sédiment négatif (reconstitué par mélange de différents

33

sédiments négatifs fluidifiés et décontaminés) inactivé (chauffage à 95°C pendant 15 minutes). Les échantillons ainsi reconstitués ont été soumis au protocole suivant :

dilution dans un tampon contenant un détergent anionique et de l'antimousse Foam Ban MS-575 pour obtenir des concentrations de 2,5 % et 1% final, respectivement.

chauffage à 95°C pendant 15 mm (inactivation des bactéries).

·un volume de 600 μ l est ajouté dans la cuve 12 x 10 75 mm (polypropylène) contenant 180 μ l de billes de verre de 100 μ m, 6 billes de verre (diamètre 2 mm), 10 billes de fer (diamètre 2 mm) et l'ensemble est agité à l'aide d'un vortex pendant 2 minutes à la puissance maximale.

En parallèle, des témoins d'expériences sont 15 réalisés : ceux-ci subissent le même protocole que précédemment décrit hormis l'étape de d'agitation des billes par vortex.

Les acides nucléiques ainsi potentiellement libérés sont alors purifiés par une étape de capture 20 spécifique sur des billes magnétiques (Seradyne) dérivées avec un oligonucléotide de capture complémentaire de la séquence de l'ARN 16S de M. tuberculosis BCG, selon le protocole suivant :

 \cdot 250 μ l de lysat obtenu sont mélangés à un tampon contenant sondes oligonucléotidiques les 25 de capture à des billes magnétiques (50 μg/essai). couplées L'ensemble est incubé à 60°C, puis 10 20 mn température ambiante, puis le surnageant est éliminé après immobilisation des billes sur les parois du tube par 30 aimantation.

34

·les billes sont lavées (resuspension puis aimantation) par 2 fractions de 1 ml de tampon de lavage.

·après élimination du tampon, les billes sont resuspendues par 50 μ l d'eau et 25 μ l du mélange 5 d'amplification contenant des amorces oligonucléotidiques désoxyribonucléotides de la d'identification de М. tuberculosis ("Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct", Gen-Probe ref. 1001), qui est basé sur la "Transcription-Mediated Amplification" 10 (TMA), décrite par McDonough et coll. (Nucleic Acids Amplification Technologies, 1997, Ed. Lee, Morse & Olsvik, Eaton Publishing, Natik, USA, pp. 113-123) ainsi que Kacian et Fulz (Nucleic Acid Sequences Amplification Methods, 1995, Brevet des Etats Unis d'Amérique, 15 5,399,491).

·l'ensemble est chauffé à 60°C pendant 15 mn, refroidi à 42°C pendant 5 mn, et 25 μ l de la solution enzymatique de la trousse (contenant de l'ARN polymérase T7 et de la reverse-transcriptase) sont ajoutés.

la réaction est incubée pendant 1 heure à 42°C, puis analysée en utilisant les réactifs de détection de la trousse, suivant la technique "Hybridization Protection Assay" (HPA) décrite par Arnold et coll. (Clin. Chem., 1989, vol. 35, pp. 1588-1594).

Les réactions sont ensuites lue sur un luminomètre 450 i (Gen-Probe) et aboutissent à des données en unités de luminescence relatives (RLU), la limite de positivité d'un essai étant 30000 RLUs.

Les données obtenues sont indiquées dans le 30 tableau N+2, et correspondent a trois essais expérimentaux par conditions testées.

35

Tableau N + 2

Bactéries/ essai	10 Exp - 3	10 Exp - 1	10 Exp + 1	10 Exp + 3	
Sans	415	402	508	119736	
	467	554	422	2312	
	371	364	179756	1013140	
	418	440	60229	378396	Moyenne
	48	101	103514	552831	Ecart Type
	12	23	172	146	Coefficient de variation (%)
Avec Vortex	43117	457	1029901	1079399	
	1088	919609	125	1030602	
	389	453	1069273	1058371	
	144198	306840	700100	1056124	Moyenne
	248479	530674	605650	24476	Ecart Type
	172	173	87	2	Coefficient de variation (%)

Les résultats (voir Tableau N+2) montrent que la réalisation du protocole de lyse par billes de verre en présence d'agents antimousse permet de détecter dans les échantillons biologiques une quantité équivalente à 10⁻³ bactéries/essai, soit une quantité équivalente à 1 à 10 copies de ribosomes de manière sensible. En comparaison, l'absence de lyse (sauf chauffage initial en présence de détergent pour l'inactivation des échantillons) ne peut détecter que l'équivalent de 10 à 1000 bactéries par essai, soit 10 000 fois moins qu'avec la méthode de lyse utilisée.

Ces résultats montrent la validité du protocole associant la lyse de bactéries par choc mécanique en présence de billes (à l'aide d'un vortex ou autre) combinée à l'utilisation d'agents antimousse. La combinaison d'un procédé de lyse par agitation de billes est donc parfaitement adaptée.

37

REVENDICATIONS

- Procédé de lyse d'un échantillon biologique comprenant au moins un micro-organisme de type bactérie,
 pour libérer au moins un matériel nucléique d'intérêt appartenant audit micro-organisme, selon lequel:
 - on dispose dans un contenant ledit échantillon biologique en milieu liquide,
- on dispose dans ledit contenant au moins un
 10 matériau particulaire, relativement dur, et substantiellement inerte par rapport au matériel nucléique,
 - on soumet le mélange de l'échantillon biologique et du matériau particulaire à un mouvement,
- 15 caractérisé en ce que, en combinaison:

le mouvement choisi est de type vortex, et répond aux conditions suivantes:

- le matériau particulaire est constitué de billes de diamètre compris entre 90 et 150 μm , et
- le volume apparent des billes , Vb, et le volume de l'échantillon liquide, Ve, sont liés par la relation Ve = α .Vb, avec α compris entre 1,4 et 10 lorsque le contenant est de forme tubulaire, et α inférieur ou égal à 2,1 lorsque le contenant est de forme disque,
- 25 moyennant quoi, sans ajout de réactif et/ou étape opératoire supplémentaire, on libère directement dans le milieu liquide le matériel nucléique à l'état natif et accessible à tout réactif de traitement postérieur.
- 2. Procédé de lyse d'un échantillon biologique comprenant au moins un micro-organisme de type levure, pour libérer au moins un matériel nucléique d'intérêt appartenant audit micro-organisme, selon lequel:
- on dispose dans un contenant ledit échantillon 35 biologique en milieu liquide,

38

- on dispose dans ledit contenant au moins un matériau particulaire, relativement dur, et substantiellement inerte par rapport au matériel nucléique,

on soumet le mélange de l'échantillon biologique et du matériau particulaire à un mouvement,

caractérisé en ce que, en combinaison:

le mouvement choisi est de type vortex, et répond aux conditions suivantes:

- 10 le matériau particulaire est constitué de billes ayant un diamètre d'environ 500 μ m, et
 - le volume apparent des billes , Vb, et le volume de l'échantillon liquide, Ve, sont liés par la relation Ve = α .Vb, avec α compris entre 1,4 et 10 lorsque le contenant est de forme tubulaire, et α inférieur ou égal à 2,1 lorsque le contenant est de forme disque,

moyennant quoi, sans ajout de réactif et/ou étape opératoire supplémentaire, on libère dans le milieu liquide le matériel nucléique à l'état natif et accessible 20 à tout réactif de traitement postérieur.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau particulaire est constitué de billes ayant un diamètre d'environ 100 μm .

25

4. Procédé selon les revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le mouvement de type vortex répond en outre à la relation suivante:

Vb < Ve < Vc, selon laquelle

 $Vc = \beta.Ve$, et

- β est supérieur ou égal à 2,5, Vc étant le volume utile du contenant.
- Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le contenant est de forme tubulaire,
 de préférence à fond en forme de U.

- 6. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que β est un nombre compris entre 2,5 et 30.
- 5 7. Procédé selon les revendications 1 ou 2, 4 et 5, caractérisé en ce que le contenant est un tube à fond tronconique, et α est un nombre compris entre 1,4 et 3,3, et β est un nombre compris entre 2,5 et 15, de préférence entre 3,75 et 15.

- 8. Procédé selon les revendications 1 ou, 4 et 2 et 5, caractérisé en ce que le contenant est un tube à fond en forme de U, et α est un nombre compris entre 1,4 et 3,3, de préférence est égal à 3,3, et β est un nombre 15 compris entre 3 et 30, de préférence entre 12 et 30, par exemple égal à 20.
- 9. Procédé selon la revendication 1 ou 2, et 4 caractérisé en ce que le contenant est sous forme disque 20 et α est inférieur ou égal à 1,4 et β est supérieur ou égal à 9,3.
- Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que le matériau particulaire comprend 25 d'autres billes de diamètre supérieur à celui desdites billes.
- 11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que le contenant comprend jusqu'à y compris 16 30 autres billes, de préférence jusqu'à y compris 10 autres billes, ayant un diamètre égal à environ de 2 à 3 mm,.
- Procédé selon la revendication 1 ou 2, 12. caractérisé en ce que l'on ajoute une substance anti-35 mousse à une concentration finale de 0,01 à 1%, de

40

préférence de 0,5 à 1% du volume de l'échantillon liquide, Ve.

- 13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé 5 en ce que l'on ajoute en outre un détergent de type anionique à une concentration finale de 2,5% du volume de l'échantillon liquide, Ve.
- 14. Procédé selon la revendication 1 caractérisé 10 en ce que le temps de mise en mouvement de type vortex est au moins égal à 10 secondes, de préférence au moins égal à 20 secondes, par exemple entre 1 et 5 minutes.
- 15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé
 15 en ce que le temps de mise en mouvement de type vortex est d'environ 2 minutes.
- 16. Procédé selon la revendication 2 caractérisé en ce que le temps de mise en mouvement de type vortex est 20 compris entre 8 et 20 minutes.
- 17. Procédé de traitement d'un échantillon biologique comprenant au moins un micro-organisme de type bactérie ou levure, comportant un matériel nucléique 25 d'intérêt, selon lequel:
 - on procède à une lyse dudit échantillon, selon le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 16,
- on soumet l'échantillon biologique lysé, avec ou 30 sans le matériau particulaire ayant servi à la lyse, directement à un protocole opératoire concernant spécifiquement le matériel nucléique d'intérêt, par exemple amplification ou détection nucléique.
- 35 18. Contenant à usage unique, pour la mise en oeuvre d'un procédé selon l'une quelconque des

41

revendications 1 à 16, caractérisé en ce qu'il comprend une charge d'un matériau particulaire adaptée, en fonction d'un volume prédéterminé de l'échantillon biologique, à la mise en oeuvre directe du procédé selon l'une quelconque 5 des revendications 1 à 15.

FIGURE 1


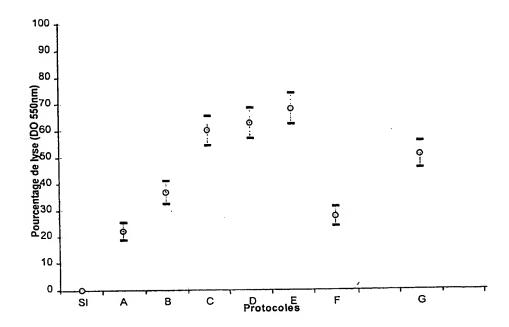


FIGURE 2

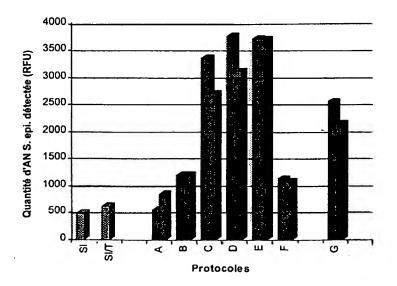

FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26)

FIGURE 3


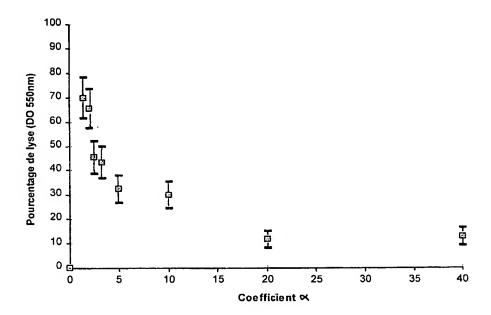


FIGURE 4

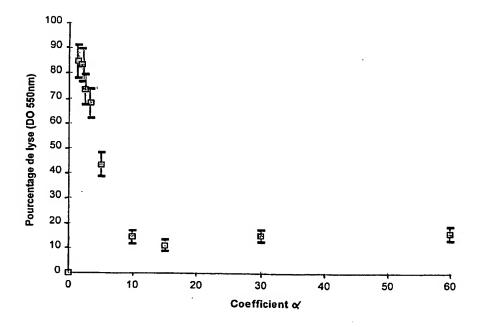

FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26)

FIGURE 5


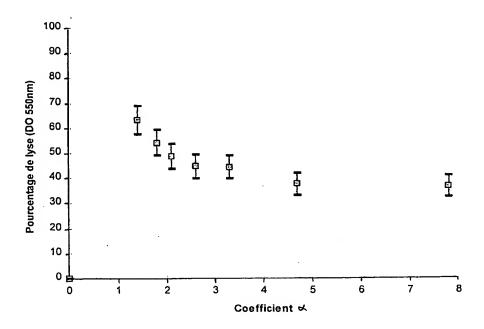


FIGURE 6

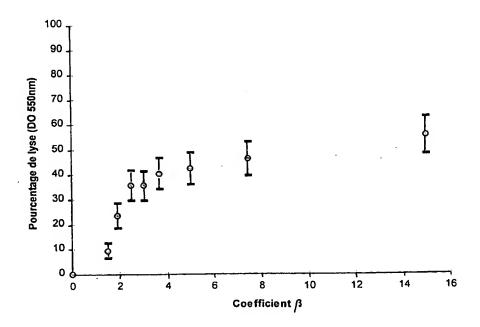

FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26)

FIGURE 7


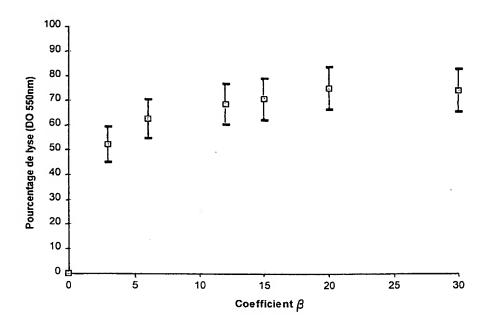


FIGURE 8

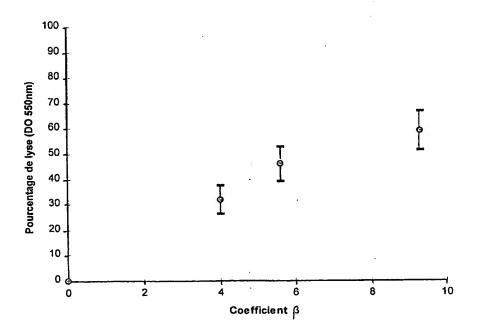

FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26)

Ξ

FIGURE 9

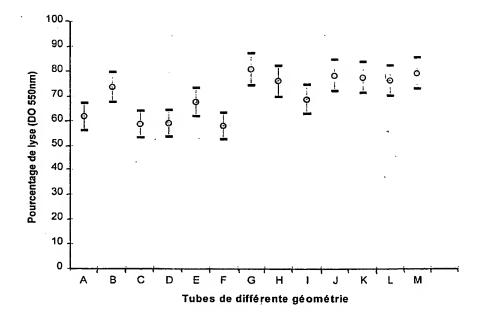


FIGURE 10

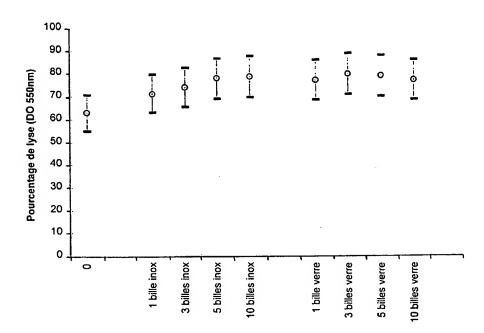


FIGURE 11

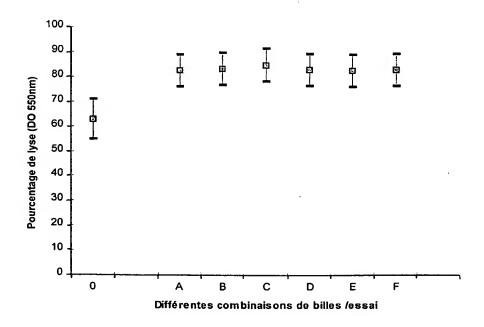


FIGURE 12


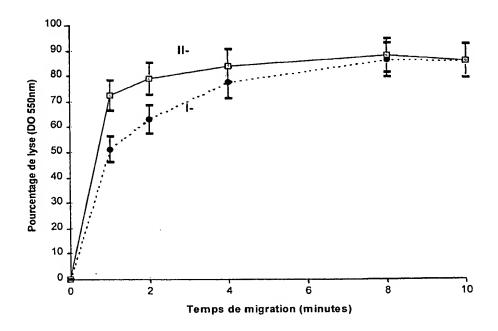


FIGURE 13

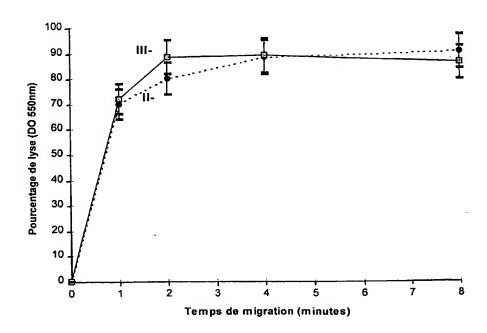

FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26)

Inter nal Application No PCT/IB 98/01475

			
A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER C12M1/33 C12N1/06 C12M3/08	3	
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classification C12M C12N		
<u></u>	tion searched other than minimum documentation to the extent that s		
Electronic	fata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	. Relevant to claim No.
Y	US 5 643 767 A (FISCHETTI VINCENT AL) 1 July 1997 see column 1, line 1 - line 32; of 1-3; figures 1-4; examples see column 7, line 53 - line 60		1-18
Y	US 4 295 613 A (MOORE W EDWARD C 20 October 1981 cited in the application see claims 1,7	ET AL)	1-18
Y	FR 1 576 299 A (VYZKUMNY USTAV OF SYNTHEZ PARDUBICE RYBITVI) 25 Juncited in the application see page 4, line 23 - line 27; clifigure see page 4, column 24	ly 1969 laims;	1-3,9,18
	· -	-/	
	<u></u>		
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
"A" docume	ategories of cited documents : ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the o	the application but eory underlying the slaimed invention
"L" docume which citatio "O" docum other	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	carnot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the carnot be considered to involve an in document is combined with one or manerts, such combination being obvious process.	cument is taken alone claimed invention ventive step when the ore other such docu-
"P" docume later ti	ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	in the art. "&" document member of the same patent	family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
1	1 January 1999	26/01/1999	
Name and r	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
Ì	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Coucke, A	

PCT/IB 98/01475

Category *	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	Comment of the second s	
Υ	EP 0 317 803 A (ABBOTT LAB) 31 May 1989 see claims	1,3
ſ	EP 0 288 618 A (GEN PROBE INC) 2 November 1988 see claims	1,2, 15-18
1	US 5 464 773 A (MELENDEZ LUIS A ET AL) 7 November 1995 see column 2, line 14 - line 24; claims	1-10
'	US 4 666 850 A (MEHL JACK J ET AL) 19 May 1987 see claims; figures	1-6,8,9, 15
ľ	EP 0 341 215 A (CIBA GEIGY AG ;UCP GEN PHARMA AG (CH)) 8 November 1989 see claims	4,6,8,9, 15
Y	EP 0 284 044 A (ZYMOGENETICS INC) 28 September 1988 see page 7, paragraph 4; claims	4,6,8,9, 15
Y	US 4 775 622 A (HITZEMAN RONALD A ET AL) 4 October 1988 see claims; examples	4,6,8,9, 15

information on patent family members

Inter 'nal Application No PCT/IB 98/01475

_					90/014/5
	atent document d in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US	5643767	Α	01-07-1997	EP 0755401 A	29-01-1997
				JP 10501685 T	17-02-1998
				WO 9528409 A	26-10-1995
US	4295613	Α	20-10-1981	NONE	
FR	1576299	A	25-07-1969	NL 6811627 A	20-02-1969
EP	0317803	A	31-05-1989	US 4873035 A	10-10-1989
	•			AU 2571588 A	25-05-1989
				CA 1336067 A	27-06-1995
				DE 3881350 A	01-07-1993
				DE 3881350 T	18-11-1993
				ES 2056874 T	16-10-1994
				JP 2139029 A	29-05-1990
				US 5017501 A	21-05-1991
EP	0288618	Α	02-11-1988	AU 604684 B	03-01-1991
				AU 7040487 A	24-09-1987
				CA 1296604 A	03-03-1992
				JP 2026041 C	26-02-1996
				JP 5028599 B	26-04-1993
				JP 62236478 A JP 2097840 C	16-10-1987
				JP 2097840 C JP 5068553 A	02-10-1996 23-03-1993
			•	JP 8013272 B	14-02-1996
				US 5374522 A	20-12-1994
US	5464773	Α	07-11-1995	NONE	
	4666850	A	19-05-1987	AU 562681 B	18-06-1987
00	1000000	,,	15 00 150,	AU 2906184 A	
				AU ZYVDIO4 A	UZ=U5=1985
					02-05-1985 11-06-1985
				BR 8403243 A DK 512484 A	11-06-1985 29-04-1985
				BR 8403243 A	11-06-1985
				BR 8403243 A DK 512484 A	11-06-1985 29-04-1985
			·	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985
				BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987
				BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994
			·	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987
 EP	 0341215	A	 08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994
EP	0341215	A	08-11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
 EP	0341215	A	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
EP	0341215	Α	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
EP	0341215	Α	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DE 68923123 D	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
EP	0341215	A	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DE 68923123 D DE 68923123 T	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989 15-07-1995 22-08-1991 09-11-1989 24-10-1990 27-07-1995 30-11-1995
EP	0341215	A	08-11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DE 68923123 D DE 68923123 T DK 217589 A	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989 15-07-1995 22-08-1991 09-11-1989 24-10-1990 27-07-1995 30-11-1989
EP	0341215	––––– A	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DE 68923123 D DE 68923123 T DK 217589 A ES 2072918 T	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
EP	0341215	A	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DE 68923123 D DE 68923123 T DK 217589 A ES 2072918 T FI 892114 A	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
EP	0341215	A	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DD 283839 A DE 68923123 D DE 68923123 T DK 217589 A ES 2072918 T FI 892114 A IE 66044 B	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
EP	0341215	Α	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DE 68923123 D DE 68923123 T DK 217589 A ES 2072918 T FI 892114 A IE 66044 B IL 90170 A	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
EP	0341215	Α	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DE 68923123 D DE 68923123 T DK 217589 A ES 2072918 T FI 892114 A IE 66044 B IL 90170 A JP 2104279 A	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
EP	0341215	Α	08-11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DE 68923123 D DE 68923123 T DK 217589 A ES 2072918 T FI 892114 A IE 66044 B IL 90170 A JP 2104279 A JP 2107291 C	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
EP	0341215	A	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DE 68923123 D DE 68923123 T DK 217589 A ES 2072918 T FI 892114 A IE 66044 B IL 90170 A JP 2104279 A	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989
EP	0341215	A	08 - 11-1989	BR 8403243 A DK 512484 A EP 0143329 A JP 1403489 C JP 60102560 A JP 62009316 B MX 172788 B US 4886071 A AT 124086 T AU 614121 B AU 3382889 A DD 283839 A DE 68923123 D DE 68923123 T DK 217589 A ES 2072918 T FI 892114 A IE 66044 B IL 90170 A JP 2104279 A JP 2107291 C JP 8024565 B	11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989

information on patent family members

Intermediation No
PCT/IB 98/01475

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
EP	0341215	Α	•	PT	90436 A,B	30-11-1989
EP	0284044	A	28-09-1988	CA	1304020 A	23-06-1992
				DE	3888561 D	28-04-1994
				DE	3888561 T	01-09-1994
				DK	159188 A	14-12-1988
				JP	1016587 A	20-01-1989
				JP	2795850 B	10-09-1998
U\$	4775622	A	04-10-1988	AU	574323 B	07-07-1988
				AU	1215283 A	15-09-1983
				BG	46159 A	16-10-1989
				BR	8301150 A	22-11-1983
				CZ	8301608 A	16-07-1997
	•			DD	207220 A	22-02-1984
			Ť	DE	3308215 A	17-11-1983
				DE	3382694 A	22-07-1993
				DK	111283 A,B,	28-10-1983
				EP	0088632 A	14-09-1983
				FI	830774 A	09-09-1983
				FR	2523152 A	16-09-1983
				GB	2116567 A,B	28-09-1983
				GR	78506 A	27-09-1984
				ΙE	55743 B	02-01-1991
				JP	8029111 B	27-03-1996
				JP	58174396 A	13-10-1983
				JP	6181779 A	05-07-1994
				OA	7338 A	31-08-1984
				PT	76360 B	12-02-1986
				ZA	8301569 A	25-04-1984

Dem Internationale No

PCT/IB 98/01475

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 C12M1/33 C12N1/06

C12M3/08

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fols selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 C12M C12N

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le c

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	US 5 643 767 A (FISCHETTI VINCENT A ET AL) 1 juillet 1997 voir colonne 1, ligne 1 - ligne 32; revendications 1-3; figures 1-4; exemples voir colonne 7, ligne 53 - ligne 60	1-18
Y	US 4 295 613 A (MOORE W EDWARD C ET AL) 20 octobre 1981 cité dans la demande voir revendications 1,7	1-18
Y	FR 1 576 299 A (VYZKUMNY USTAV ORGANICKYCH SYNTHEZ PARDUBICE RYBITVI) 25 juillet 1969 cité dans la demande voir page 4, ligne 23 - ligne 27; revendications; figure voir page 4, colonne 24	1-3,9,18
	_/ 	

X	Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	χ	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée
- "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
- "Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métler
- "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

11 janvier 1999

26/01/1999

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016 26/01/1999 Fonctionnaire autorisé

Coucke, A

Dem • Internationale No
PCT/IB 98/01475

		98/01475
C.(suite) De	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indicationdes passages pertinents	
Catogorie	testimento des documents cites, avec, e cas ecneant, i indicationoes passages pertinents	no. des revendications visées
Y	EP 0 317 803 A (ABBOTT LAB) 31 mai 1989 voir revendications	1,3
Y	EP 0 288 618 A (GEN PROBE INC) 2 novembre 1988 voir revendications	1,2, 15-18
Y	US 5 464 773 A (MELENDEZ LUIS A ET AL) 7 novembre 1995 voir colonne 2, ligne 14 - ligne 24; revendications	1-10
Y	US 4 666 850 A (MEHL JACK J ET AL) 19 mai 1987 voir revendications; figures	1-6,8,9, 15
′	EP 0 341 215 A (CIBA GEIGY AG; UCP GEN PHARMA AG (CH)) 8 novembre 1989 voir revendications	4,6,8,9,
,	EP 0 284 044 A (ZYMOGENETICS INC) 28 septembre 1988 voir page 7, alinéa 4; revendications	4,6,8,9, 15
' .	US 4 775 622 A (HITZEMAN RONALD A ET AL) 4 octobre 1988 voir revendications; exemples	4,6,8,9, 15
		<u>\$</u>

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dem Internationale No PCT/IB 98/01475

					PC1/1B	98/01475	
	ument brevet cité pport de recherch		Date de publication	Membre(s) d famille de brev		Date de publication	
US	5643767	Α	01-07-1997	JP 10501	6401 A 685 T 8409 A	29-01-1997 17-02-1998 26-10-1995	
US	4295613	A	20-10-1981	AUCUN			
FR	1576299	Α	25-07-1969	NL 6811	.627 A	20-02-1969	
EP	0317803	A	31-05-1989	AU 2571 CA 1336 DE 3881 DE 3881 ES 2056 JP 2139	350 T	10-10-1989 25-05-1989 27-06-1995 01-07-1993 18-11-1993 16-10-1994 29-05-1990 21-05-1991	
EP	0288618	А	02-11-1988	AU 7040 CA 1296 JP 2026 JP 5028 JP 62236 JP 2097 JP 5068 JP 8013	041 C 3599 B	03-01-1991 24-09-1987 03-03-1992 26-02-1996 26-04-1993 16-10-1987 02-10-1996 23-03-1993 14-02-1996 20-12-1994	\$ & **;
US	5464773	Α	07-11-1995	AUCUN			
US	4666850	Α	19-05-1987	AU 2906 BR 8403 DK 512 EP 0143 JP 1403 JP 60102 JP 62009 MX 172	2681 B 5184 A 6243 A 6484 A 6329 A 6489 C 6560 A 6316 B 6771 A	18-06-1987 02-05-1985 11-06-1985 29-04-1985 05-06-1985 09-10-1987 06-06-1985 27-02-1987 13-01-1994 12-12-1989	
EP	0341215	A	08-11-1989	AU 614 AU 3382 DD 283 DE 68923 DK 217 ES 2072 FI 892 IE 66 IL 90 JP 2104 JP 2107 JP 8024 KR 9705 MX 169	1086 T 1121 B 12889 A 13839 A 13123 T 1589 A 12918 T 12114 A 10044 B 10170 A 1279 A 1279 A 1279 A 1291 C 1565 B 1584 B 1584 B 1593 B	15-07-1995 22-08-1991 09-11-1989 24-10-1990 27-07-1995 30-11-1995 05-11-1989 01-08-1995 05-11-1989 13-12-1995 31-12-1995 17-04-1990 06-11-1996 13-03-1996 18-04-1997 08-07-1993 03-02-1997	

Renseignements relatifs and membres de familles de brevets

Dem Internationale No PCT/IB 98/01475

Document brevet cité au rapport de recherche					mbre(s) de la le de brevet(s)		Date de publication	
EP	0341215	Α	<u></u>	PT	90436	A,B	30-11-1989	
EΡ	0284044	Ä	28-09-1988	CA	1304020	Α	23-06-1992	
				DE	3888561	D	28-04-1994	
				DE	3888561	T	01-09-1994	
				· DK	. 159188	Α	14-12-1988	
				JP	1016587	Α	20-01-1989	
				JP	2795850	В	10-09-1998	
US	4775622	Α	04-10-1988	AU	574323	В	07-07-1988	
				AU	1215283	Α	15-09-1983	
				BG	46159	Α	16-10-1989	
•				· BR	8301150	Α	22-11-1983	
				CZ	8301608	Α	16-07-1997	
				DD	207220	Α	22-02-1984	
				DE	3308215	Α	17-11-1983	
				DE	3382694		22-07-1993	
				DK	111283	Α,Β,	28-10-1983	
				EP	0088632		14-09-1983	
				FI	830774	Α	09-09-1983	
				FR	2523152		16-09-1983	
				GB	2116567		28-09-1983	
				GR	78506	Α	27-09-1984	
				ΙE	55743	В	02-01-1991	
				· JP	8029111	В	27-03-1996	
				JP	58174396	Α	13-10-1983	
				JP	6181779	A	05-07-1994	
				OA.	7338	Α	31-08-1984	
				PT	76360		12-02-1986	
				ZA	8301569	Α	25-04-1984	